

De perfecte
Oplossing
Voor
Huidproblemen

*Advān***Tek**



LED Mask

Handleiding
Versie: 102018

LET OP !!!


- ⚠ Het niet volgen van de handleiding kan tot ernstig letsel leiden
- ❗ Het niet volgen van de handleiding kan leiden tot beschadiging van het product

⚠ Belangrijk voor gebruik




Bij het uitnemen van het aansluitsnoer niet het snoer maar de stekker vasthouden.

Een beschadigd aansluitsnoer kan de reden zijn voor kortsluiting of zelf brand.

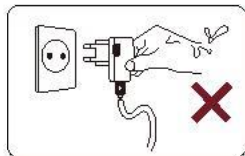


Het masker tijdens opladen niet gebruiken.
Stekker niet aanraken met natte handen.

Elektrische schok kan het gevolg zijn.

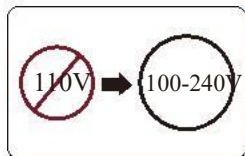


Gebruik bijgeleverde 5V,2A power adapter en het juiste stopcontact.
Poweradapter is geschikt voor 100V-240V.

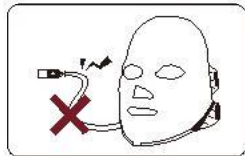


Bij voorkeur kabels en stekkers niet buigen of belasten.

Kortsluiting of brand kan het gevolg zijn.

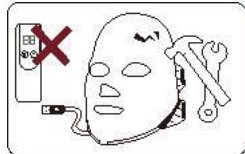


Verwissel niet zelf geen kabels, stekkers of batterijen
kan leiden tot schade kortsluiting of brand.

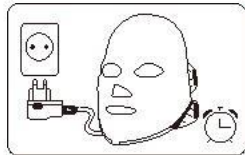

Haal de stekker na het opladen uit het stopcontact.
Batterij niet langer dan 8 uur opladen.
Batterij kan ongeveer 500x volledig worden opgeladen.

Niet volgen kan kortsluiting of brand tot gevolg hebben.

⚠ Belangrijk tijdens gebruik

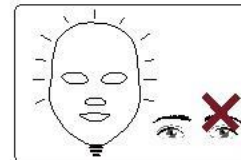


Staar niet in de LED lampjes
Bescherm de ogen wanneer je gebruik maakt van het blauwe licht.

Het blauwe licht kan de ogen beschadigen. In principe kan het licht niet in de ogen komen wanneer het masker juist wordt gedragen.




Is het product of delen daarvan nat geworden of in het water gevallen onmiddellijk stoppen. Bel de leverancier.

Het simpelweg laten drogen is niet vanzelfsprekend een oplossing en kan leiden tot kortsluiting beschadiging van het product en brand.

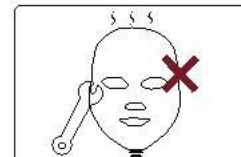


bij vreemde geluiden of vreemde geur of rook het gebruik staken
apparaat uitzetten en de leverancier bellen.

Niet volgen kan leiden tot kortsluiting en brand.

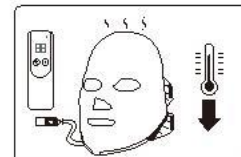

Bij schoonmaken het apparaat uitzetten en de afstandsbediening loskoppelen.

Niet volgen kan leiden tot elektrische Schok.

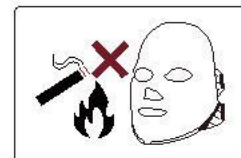


Uit de buurt houden van extreme warmtebronnen zoals brandende sigaretten.

Vervorming van het apparaat en brand kunnen het gevolg zijn.



Niet schoonmaken met brandbare vloeistoffen zoals benzine, thinner, alcohol en butyl acetaat,


Niet volgen kan leiden tot elektrische schok en brand.

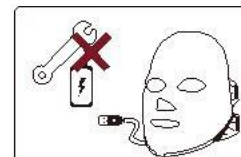

Batterij niet demonteren of vervangen


Kan leiden tot schade aan het apparaat maar ook tot kortsluiting en brand.

⚠ Belangrijk tijdens gebruik !!

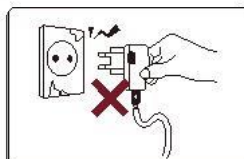


Niet gebruiken wanneer stekker of kabel of stopcontact beschadigd zijn..

Elektrische schok, kortsluiting of brand kunnen het gevolg zijn.

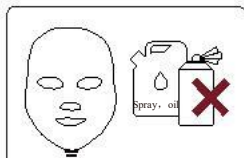


Geen licht ontvlambare stoffen (spray, olie, gas) vlakbij het masker bewaren.

Explosie en brandgevaar

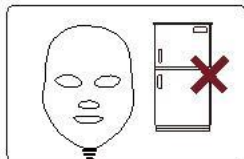


Product niet in de koelkast bewaren.

Kan product ernstig beschadigen.

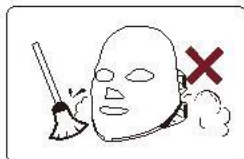


Niet in extreem stoffige of vochtige omgeving gebruiken

Kan leiden tot elektrische schok en brand

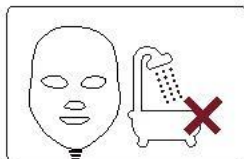


Niet gebruiken in natte omgeving zoals sauna, douche en zwembad.

Kan leiden tot elektrische schok en brand.

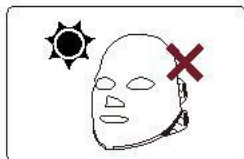

Weghouden van plaatsen met hoge temperatuur en niet in direct zonlicht gebruiken of bewaren


Omgevingstemperatuur 5-35 graden Celsius. Vochtigheidsgraad 15% tot 75% Barometer druk 700-1060hpa)
Niet volgen kan leiden tot vervorming en schade.

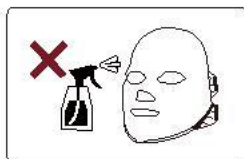


Na gebruik de binnenkant schoonmaken met droge of licht vochtige doek. NIET met water schoonmaken.

Niet volgen kan leiden tot elektrische schok en brand.

⚠ Belangrijk tijdens gebruik !!

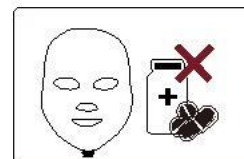


Niet gebruiken in omgeving waar medicijnen worden gebruikt of toegediend.

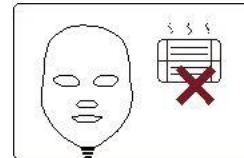


Uit de buurt houden van extreme warmtebronnen.

Niet volgen kan leiden tot vervorming verkleuring en brand.

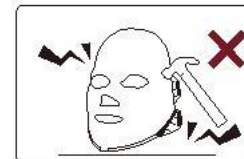


Geen kracht op het product uitoefenen .

Kan product ernstig beschadigen

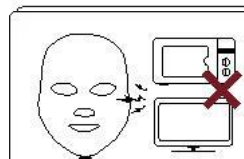


Bij voorkeur niet gebruiken in de buurt van sterk magnetisch veld zoals in de buurt van TV en Magnetron etc.

Kan het product mogelijkwijs beschadigen.

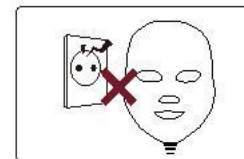


Niet opladen wanneer stroomvoorziening instabiel is of fluctueert.

Kan leiden tot ernstige beschadiging aan het product.

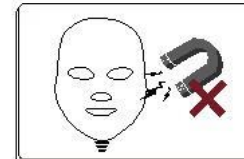

Weghouden bij magnetisch materiaal


Kan het product ernstig beschadigen.

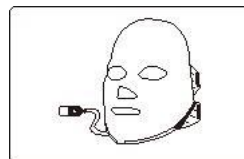

Dit product is uitsluitend ontworpen voor het behandelen van huid problemen. Indien niet in gebruik koppel dan het masker los van de afstandsbediening .

Buiten bereik van kinderen houden

Product samenstelling

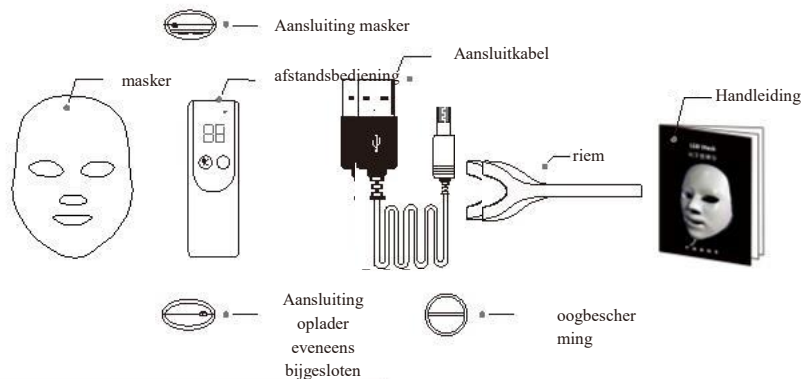

Eigenschappen

- (1) Super ergonomisch ontworpen waardoor het LED licht snel door de huid wordt opgenomen.
- (2) Rubber bescherming bij de ogen waardoor je geen last hebt van LED schittering.
- (3) Soort licht en tijd kunnen naar wens worden aangepast.
- (4) Masker schakel vanzelf uit na verloop van de ingestelde tijd.
- (5) Compact en licht in gewicht. Zorgt voor uw huid overal en altijd..

6 functies

- (1) **Activeert Collageen:** bevordert de collageen productie, geeft een mooie en soepele huid.
- (2) **Vermindert rimpels:** vergroot de celcapaciteit van de huid. Laat de huid meer ademen. Vermindert ruwe huid en rimpels. Werkt tegen veroudering van de huid.
- (3) **Gezondere huidskleur:** verbetert het metabolisme van de huid en versnelt de ontgiftig. Remt de werking van Melanine (veroorzaakt ouderdomsvlekken)
- (4) **Vlekken in het gezicht verdwijnen:** herstelt het pigment, bevordert microcirculatie (bloedcirculatie door de kleinste vaten). Sproeten en rode vlekken vervagen.
- (5) **Versteviging van de huid:** bevordert de aanmaak van collageen, verstevigt de poriën en bevordert de gladheid en elasticiteit van de huid.
- (6) **Acne verdwijnt:** verhindert acne ontstekingen, zorgt voor juiste vetbalans vd huid, blackheads verdwijnen

How to use

- (1) Gebruik normale vocht inbrengende crème nadat u uw gezicht heeft schoongemaakt. Gebruik Crème is een aanbeveling geen voorschrift.
- (2) Zet het LED masker op
- (3) Stel de hoofdband
- (4) Sluit het masker aan op de afstandsbediening en kies soort licht en tijd.
- (5) Geniet van de gezichtsbehandeling.
- (6) Na afloop masker uitzetten en schoonmaken

Afstandsbediening en gebruik

1. Zet het masker aan druk op linker knop afstandsbediening en hou 2 seconden ingedrukt.

Standaard staat het masker op het rode licht..

Druk daarna kort op de linkerknop om de kleur licht te veranderen. Na rood komt blauw dan geel, rose en daarna weer de beginkleur rood.

2. Timer/afstandsbediening. Het masker heeft een afstandsbediening met timer. Standaard staat tijd is 10 minuten. Gebruik de rechterknop om de tijd te veranderen. Druk kort op de rechterknop en de timer verspringt naar 15 minuten nog een keer drukken geeft 20 minuten en druk je nog een keer dan gaat de tijd terug naar de standaard tijd van 10 minuten. Na instelling van de tijd gaat het display lampje met de tijd na ongeveer 5 seconden uit. Wanneer de ingestelde tijd voorbij is schakelt het masker automatisch uit.
3. Aanbevolen tijden en frequenties:

Voor bijhouden: 10 minuten per keer. Voor verbetering : 15 minuten per keer, Versterking : 20 minuten per keer. Ingeval bestrijding Acne is de tijd 20 minuten Rood licht en geel licht kan en mag elke dag of zelfs 2 x per dag.

Dual-band rose licht (Rood licht + blauw licht) tegen Acne: 2 x per week. Tussen de sessies moet een minimaal interval van 48 uur zitten.

Andere behandeling van Acne is rood licht combineren met blauw licht.:Gebruik eerste 2 weken blauw licht daarna 2 weken rood licht. Ook hier een interval van minimaal 48 uur tussen de sessies. Een kuur is 4 weken die aansluitend herhaald kan worden.

* wanneer het rode lampje op de afstandbediening gaat branden moet hij opgeladen worden.

Gebruik bijgeleverde oplader of andere oplader van 5V,2A en 110V-240V. 1 uur opladen is 90% vol, 3 uur opladen 100%. Bij 100% gaat rode lampje uit. Max laadtijd 8 uur niet overschrijden!!

Het masker doet het niet

Dit is een LED masker met ROOD licht, GEEL licht, BLAUW licht en een dual band ROSE licht wat een combinatie is van ROOD en BLAUW licht.

630nm rood licht

Bekend als collageen licht. Stimuleert de aanmaak van Collageen en daarmee de vernieuwing en verjonging van de huid. Bevordert de bloedsomloop. De huid voelt zachter en beter aan.

Klinische functie: Tegen veroudering van de huid, vermindering van allergieën, vermoeidheid en een droge huid.

415nm blauw licht

Verhindert en vermindert verdere ontsteking bij acne en laat de ontsteking verdwijnen zonder schade aan de huid.

Klinische functie: verdrijft acne ontstekingen en zwarte puntjes (blackheads) zorgt voor een juiste vetbalans

van de huid. Maakt de poriën in je gezicht kleiner en herstelt de huid.

590nm geel licht

Bevordert de zuurstofopname tussen de cellen en voedt de cellen opnieuw. Beschermt de immuun (Lymphocyte) cellen

Klinische functie: Algehele verbetering van de huid. Tegen donkere vlekken, ruwe huid, rimpels etc. Zorgt voor een mooie huid en versterkt het immuun systeem.

630nm +415nm Rose dual band licht.

Is een combinatie van rood en blauw licht en combineert ook de fotherapie effecten van beiden.

Klinische functie : grondig reparatie van de huid, voeden van de huid. Heeft in het bijzonder een sterk effect bij het bestrijden van Acne.

(1) Als u zich niet lekker voelt tijdens gebruik, de huid rood wordt of verkleuringen langer dan 24 uur blijven stop dan met gebruik van het masker en raadpleeg een arts.

(2) Gebruik het masker niet wanneer u een licht gevoelige huid hebt of wanneer u medicijnen gebruikt die licht allergie kunnen veroorzaken of wanneer u een epilepsie patiënt bent of last hebt van uw schild klier en u daar ook medicijnen voor gebruikt.

(3) Er zijn geen aanwijzingen dat gebruik van het masker een negatief effect zou hebben op zwangere vrouwen of de foetus maar om iedere vorm van risico uit sluiten adviseren wij dat zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven het gebruik van dit masker vermijden.

(4) Mensen met serieuze verwondingen moeten die wonden niet blootstellen aan het LED licht

Gaat niet aan

De kabel van het masker niet aangesloten op afstandsbediening
Power knop is niet ingedrukt.
Batterij van de afstandsbediening is leeg..

Check de kabel.

Powerknop langer indrukken
Afstandsbediening opladen

LED lampjes lichten niet op. Apparaat staat wel aan.

Kabel naar het masker niet aangesloten. Anders PCB probleem.

Check de kabel. Is dat het niet dan leverancier bellen.

Licht gaat aan en uit en je kunt niet meer van licht wisselen.

Batterij afstandsbediening is leeg.

Afstandsbediening opladen

Produkt Specificaties

- . Product name: BBWC LED Mask
- . Model name: LED YM 5W
- . Product S/N: 122019
- . Input: 5VDC, 2A
- . Maximale lichtkracht (W/m)/frequentie (nm): Rood licht 60W/m², 630nm; Blauw licht 30W/m², 415nm; Geel licht t 60W/m², 590nm; Dual-band licht 60W/m², 630nm+415nm.

Levensduur bij normaal/frequent gebruik minimaal 5 jaar.

Standards: GB4706.1-2005, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Distributie voor Europa: BBWC Nederland info@bbwc.nl

WAARSCHUWING: Het LED licht kan schadelijk zijn voor de ogen. Niet in het licht staren.

OP  - RADIATION APERTURE **B**

* Appearance, design and product standard of this product can be changed to improve the quality of product without notice.

* The manufacturer reserves right of final interpretation of this product

Warranty information

1. Wij garanderen de kwaliteit van dit product
2. Ons bedrijf (BBWC) is derhalve verantwoordelijk voor gratis onderhoud en reparatie voor een periode van 12 maandag vanaf datum van aankoop.
3. In de onderstaande gevallen is de garantie niet gratis maar kan we service tegen betaling worden verleend.
 - (1) De garantieperiode is verstreken
 - (2) Aankoopnota bij BBWC of een van haar klanten kan niet worden overlegd.
 - (3) Er is door de klant of door derden gerommeld aan het product.
 - (4) Het product is door een ongeluk kapot gegaan dus niet tijdens normaal gebruik.
 - (5) Schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in de handleiding.
 - (6) Schade als gevolg van nalatigheid in onderhoud..
 - (7) Schade veroorzaakt door natuurrampen en/of oorlogen.

Garantie kan alleen gegeven worden op basis van een aankoopnota waarop duidelijk de aanschafdatum is te zien. Zonder aankoopbewijs kunnen we geen garantie geven.

BBWC
info@bbwc.nl

: